


VITAHOME

Bei Bedarf können Sie uns anrufen
Service - Hotline **0431 - 72 00 45 00**

Vorderseite

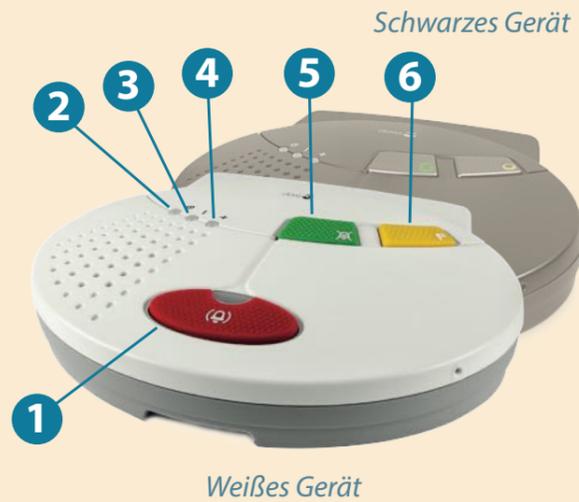


Schwarzes Gerät

Weißes Gerät

Die Inbetriebnahme wird anhand des weißen Gerätes erläutert. Schwarzes und weißes Gerät sind baugleich.




Rückseite

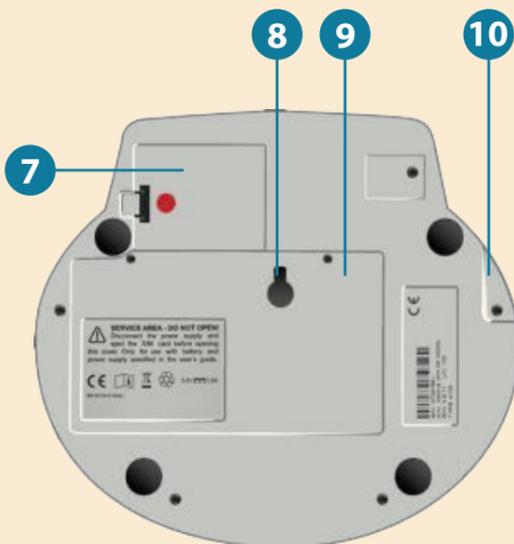

- | | |
|--|---|
| 1. Notruftaste
<i>Blinkt langsam rot</i> | (Rote Taste / Leuchtdiode)
Normaler Betrieb
Alarmfunktion ist aktiviert
Ruhemodus
Keine Notrufkontakte programmiert
Akkubetrieb (Stecker in die Steckdose stecken) |
| 2. Powerstatus
<i>Leuchtet grün</i> | (Leuchtdiode)
Normaler Betrieb
Netzstrom an
Bereit für die Programmierung des Alarmzubehörs (z.B. Funkarmband oder Sturzsensordatensender)
Akkubetrieb (Stecker in die Steckdose stecken) |
| 3. Fehleranzeige
<i>Leuchtet rot</i> | (Leuchtdiode)
Normaler Betrieb
GSM-Fehler (Mobifunkempfang gestört)
Es wird eine GSM-Verbindung hergestellt |
| 4. Statusanzeige
<i>Leuchtet rot</i> | (Leuchtdiode)
Normaler Betrieb
Akkuprobblem
(Hotline 0431-72 00 45 00 anrufen) |
| 5. Grüne Taste | Notruf aufheben |
| 6. Gelbe Taste | Sondertaste (derzeit ohne Funktion) |
| 7. Abdeckung | Hier befindet sich der Anschlusschacht mit dem USB-Anschluß für das Netzkabel und die SIM-Karte |
| 8. Befestigung | Befestigungsbuchse |
| 9. Akkuschlacht | keinesfalls entfernen |

VITAHOME


Seite 1

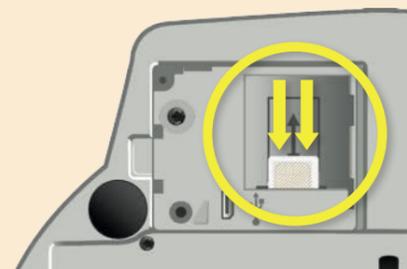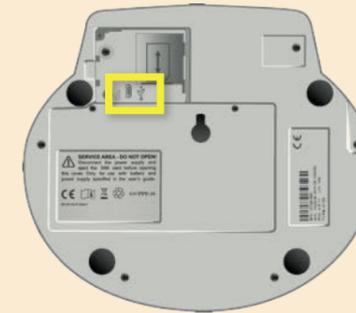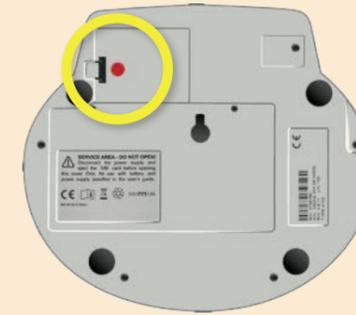

1. Öffnen Sie bitte die Abdeckung (mit dem roten Punkt) auf der Rückseite Ihres neuen VITAHOME Notrufgerätes. Sie finden darunter den Anschlusschacht.

2. Im Anschlusschacht befindet sich der SIM-Karten-Ein Schub und der USB-Netzanschluss. Das mitgelieferte Netzteil schliessen Sie an den USB-Anschluß an.

Rechts sehen Sie eine vergrößerte Abbildung, wo der Stecker hineingehört. (Sie finden den Anschluss im gelb markierten Feld links)

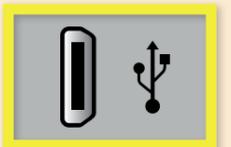

3. So, der USB-Stecker sitzt jetzt an der richtigen Stelle im Gerät und es ist nur noch das Ladegerät in eine nahegelegene Steckdose zu stecken (siehe Abb. links, gelber Kreis).

4. Im SIM-Karten-Schlacht befindet sich schon eine SIM-Karte leicht eingesteckt. Diese schieben Sie in Richtung der gelben Pfeile bis zum Anschlag hinein (siehe Abb. links, gelber Kreis). Jetzt ist das Gerät betriebsbereit und in wenigen Augenblicken aktiv. Es dauert nur ca. 1 Minute, bis der Empfang zu unserer Notrufzentrale hergestellt ist. Das löst natürlich noch keinen Notruf aus!


Lesen Sie bitte auf der Seite 2 weiter

Bei Bedarf rufen Sie uns bitte an unter **0431 - 72 00 45 00**

Bei Bedarf rufen Sie uns bitte an unter **0431 - 72 00 45 00**




- 5.** Schliessen Sie bitte den Anschlusschacht auf der Rückseite des Gerätes wieder mit der Abdeckung und drehen Sie das Gerät um, so dass Sie die Tasten sehen (siehe Abb. links).
Wir erklären Ihnen nun, wie sich das Gerät nach Einstecken der SIM-Karte verhält. Dazu betrachten Sie bitte die drei LED-Lämpchen unterhalb der drei Zeichen **!** **+** (siehe Abb. links, gelber Kasten).

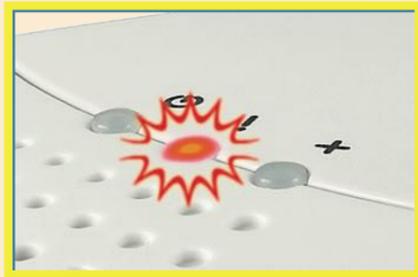

Vergrößerung des Ausschnittes der Abbildung oben


- 6.** Nach dem Einstecken der SIM-Karte, beginnt die rote LED-Lampe (**!**) ca. eine Minute zu blinken, die Verbindung zu der Zentrale wird gerade aufgebaut.

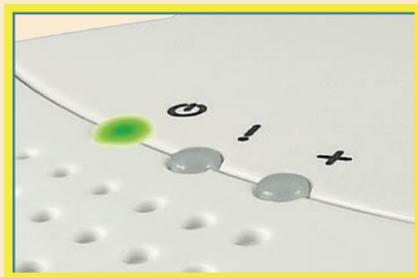

Vergrößerung des Ausschnittes der Abbildung ganz oben


- 7.** Wenn die grüne LED-Lampe (**!**) leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit und die Verbindung zur Zentrale ist hergestellt. Bitte lösen Sie jetzt einen Testnotruf aus, damit wir wissen, dass Ihr Gerät einwandfrei funktioniert.

Bei Bedarf rufen Sie uns bitte kostenfrei an unter 0800 - 111 000 2

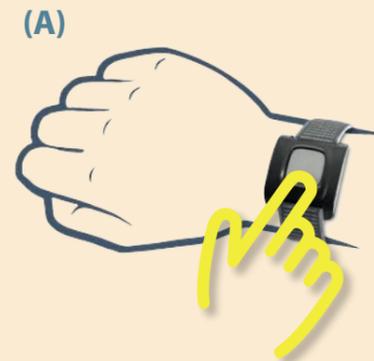

- 8.** Als nächstes lösen Sie bitte einen Testnotruf wie folgt aus:

(A) Verwenden Sie zur Auslösung des Testnotrufes unbedingt Ihren Funksender/Armbandsender oder Sturzsensoren, denn so wird gleichzeitig die Funktionsfähigkeit Ihres VITAHOME Notrufgerätes und des Funksenders/Armbandsenders bzw. Sturzsensors überprüft. Sie drücken die Taste des Funksenders/Armbandsenders oder Sturzsensors (ca. 2 Sekunden), der den Testnotruf (später auch den echten Notruf) dann über das Gerät VITAHOME auslöst (siehe Abb. (A)).

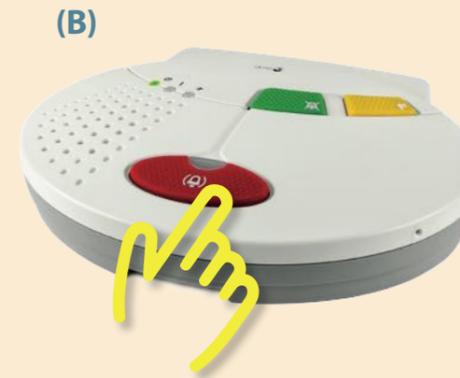

(B) Bei einem Notfall können Sie selbstverständlich auch direkt über Ihr VITAHOME Notrufgerät Hilfe erhalten, indem Sie auf die rote Taste drücken (siehe Abb. (B)).



- 9.** Jetzt meldet sich eine nette Stimme aus der Notrufzentrale über die Freisprecheinrichtung Ihres neuen Notrufsystems VITAHOME. Bitte sagen Sie einfach, dass es sich um einen Test-Notruf handelt. Das Gespräch können Sie dann beenden. Sie sind jetzt in der Notrufzentrale als aktiver Teilnehmer registriert.

Führen Sie bitte einen Test-Notruf aus Sicherheitsgründen 1 x im Monat durch.

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!

Bei Bedarf rufen Sie uns bitte kostenfrei an unter 0800 - 111 000 2